



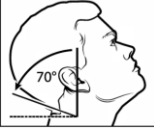


Technique de prélèvement	Test ID NOW	Test PCR STANDARD
<b>A. Gorge et nez (5 points)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utiliser l'<b>écouvillon rigide</b> fourni dans la trousse ID NOW COVID-19</li> <li>2. Pencher la tête de l'utilisateur vers l'arrière à un angle d'environ 70°.</li> <li>3. Écouvillonner <b>aux 3 sites</b> : fond de la gorge + deux amygdales.</li> <li>4. Insérer doucement le même écouvillon de 1 à 2 cm dans une narine antérieure jusqu'à rencontrer une résistance au niveau des cornets et effectuer une rotation contre la muqueuse nasale pendant 3 secondes.</li> <li>5. Répéter dans l'autre narine.</li> </ol> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 10px;">     </div>	
<b>B. Nasopharyngé</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utiliser un <b>écouvillon velouteux (flocked swab)</b></li> <li>2. Insérer délicatement à l'intérieur du nez jusqu'à ce qu'une légère résistance se fasse sentir : effectuer 5 rotations <b>IMPORTANT</b> afin d'aller chercher des cellules</li> <li>3. Casser la tige dans le milieu de transport.</li> <li>4. Bien identifier (double identification + date de prélèvement ou étiquette Omnilab), fermer et mettre l'échantillon à 4°C.</li> <li>5. Envoyer au labo entre 2° et 8°C <b>avant 72 heures</b>, sinon congeler.</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>

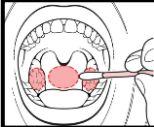

## Directives concernant les prélèvements pour la COVID-19

Échantillons à privilégier	TEST ID NOW (Points de services Nunavik)	Test PCR STANDARD
C. Gargarisme		Se référer à la méthode de soins : « <i>Prélèvement d'échantillon par gargarisme pour le test COVID-19</i> »
D. Lavage nasopharyngé		Le lavage nasopharyngé est un prélèvement en soi, il suffit de recueillir la saline utilisée dans un pot stérile (urine) et l'envoyer selon les mêmes conditions qu'un écouvillon. Envoyer au labo entre 2° et 8°C <b>dans un délai de 72 heures.</b>